





Instruktion för åtkomst till röntgenbilder från Unilabs via Sectra IDS7/Cx.

Efter man ha loggat på ser man i nedersta vänstra hörnet en sökfunktion.

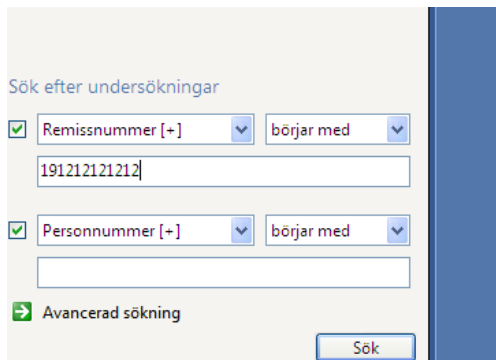


Om den är dold får man klicka på sökknappen i verktygsraden.

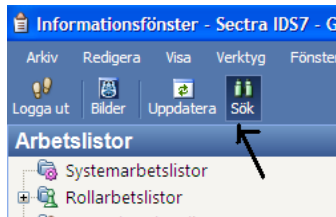

Då personnumret är inskrivet och man har klickat på Sökknappen kommer alla bilder tillhörande patienten upp

Bilderna kan vara arkiverade, det syns eftersom det före undersökningsnumret syns en symbol som ska föreställa en server. Man måste då genom att högerklicka välja "Hämta från arkiv".

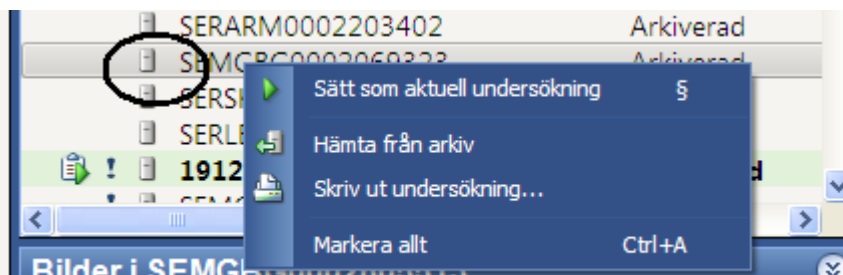



För att öppna bilderna klickar man antingen på bildknappen i verktygsfältet eller dubbelklickar på de små bilderna man får upp vid sökningen

The screenshot shows the Unilabs software interface. The top menu includes 'Arkiv', 'Redigera', 'Visa', 'Verktyg', 'Fönster', and 'Hjälp'. Below the menu are icons for 'Logga ut', 'Bilder', 'Uppdatera', and 'Sök'. The main area is divided into several sections:

- Arbetslistor** (left sidebar): A tree view containing 'Systemarbetslistor', 'Rollarbetslistor', 'Användararbetslistor', 'Halmstad < 2 VECKOR', 'Historik', 'Favoriter', and 'Sökresultat'.
- Sökresultat** (top center): A table with 3 patients and 3 investigations. The table has columns for 'Personnummer' and 'Namn'.

Personnummer	Namn
191212121212554	Tolvansson Tolvan
191212121212553	Tolvansson, Tolvan
191212121212	Tolvansson, Tolvan
- Dokument för 19121212121220121016** (right sidebar): A list of document types including 'Frågeställning', 'Anamnes', 'Remitterad av Vgr', 'Undersökningar US', 'Undersökningskomm arer (Ingen behörighet)', 'Remiss', and 'Svar'.
- Patienthistorik för Tolvansson, Tolvan** (middle): A table of remission numbers and their status.

Remissnummer	Arkivstatus
SERHIS0002293223	Original
SERHIS0002293312	Original
SERHIS0002293282	Original
SERHIS0002293258	Original
SERHIS0002292738	Original
SERHIS0002292737	Arkiverad
SERCDC0002256484	Arkiverad
SERCDC0002256474	Arkiverad
SERARM0002203402	Arkiverad
SEMGBG0002069323	Arkiverad
SERSKV0002027667	Arkiverad
SERLBY0002015437	Arkiverad
191212121220121016	Arkiverad
- Bilder i 191212121220121016** (bottom): A section showing image thumbnails for the selected investigation.

Two callout boxes with arrows point to specific features:

- 'Alla patientens undersökningar' points to the 'Patienthistorik' table.
- 'Bilder från markerad undersökning' points to the 'Bilder i 191212121220121016' section.

At the bottom, there is a search filter section: 'Sök efter undersökningar' with a checked box for 'Remissnummer [+]' and a dropdown for 'börjar med' set to '191212121212'.

Support vid problem:



Telefon: **010-160 49 00**
öppet alla helfridag dagar från 07.00-18.00
E-post: support@advance.se